



ResMed

AirFit™ N30



Ayuda a facilitar la terapia desde el principio


Presentamos AirFit™ N30 de ResMed, la primera mascarilla nasal anatómica en el mercado y nuestra opción más leve hasta ahora.*

Es fácil de usar y bien equilibrada, con características exclusivas que maximizan la comodidad y el rendimiento mientras minimiza el contacto facial. Y porque es pequeña, simple y discreta, AirFit N30 está diseñada para hacer ajustes y permitir que la terapia sea más fácil que nunca.



[ResMed.com/AirFitN30](https://www.ResMed.com/AirFitN30)

Puntos destacados de AirFit N30

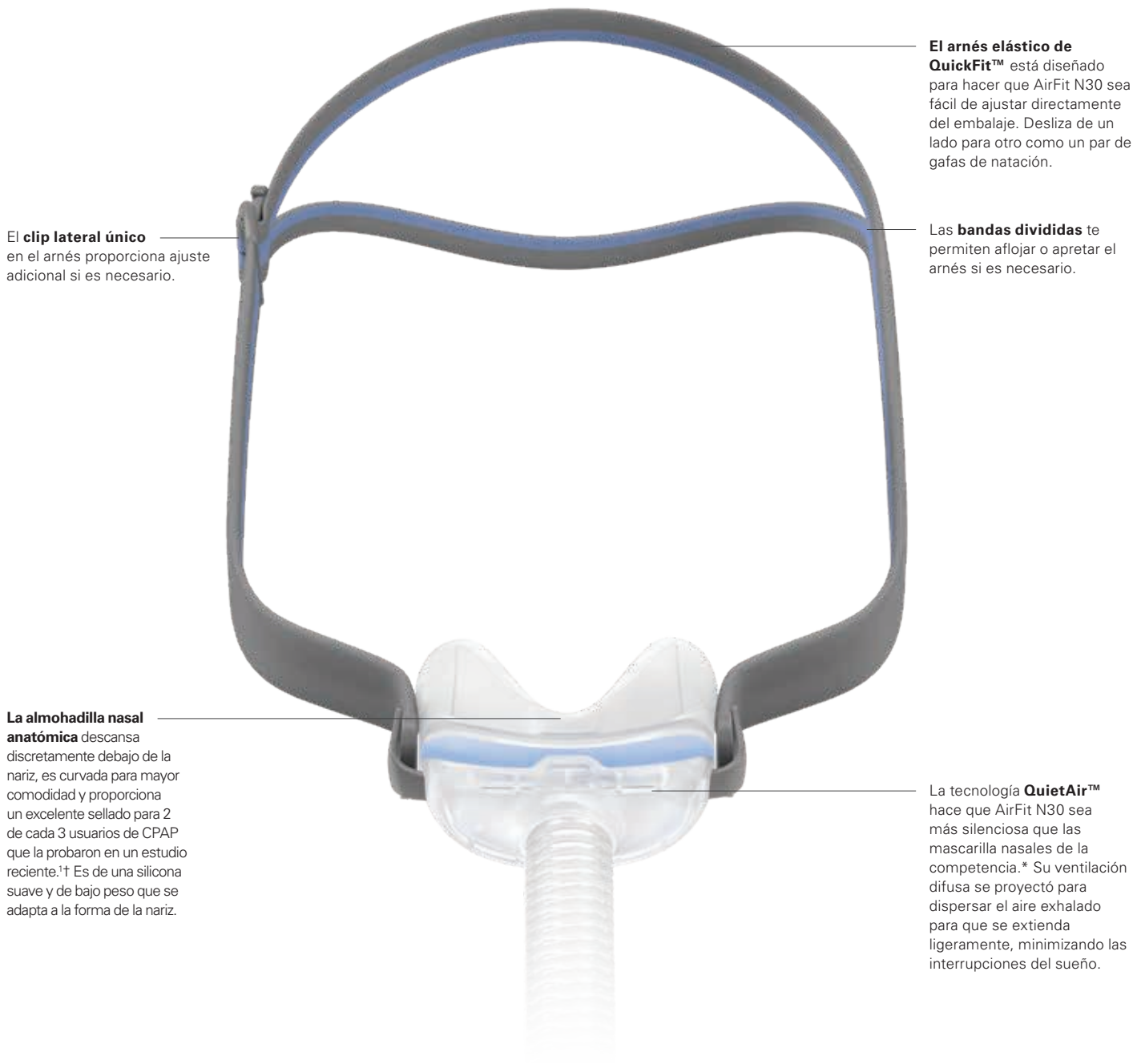

El **clip lateral único** en el arnés proporciona ajuste adicional si es necesario.

El **arnés elástico de QuickFit™** está diseñado para hacer que AirFit N30 sea fácil de ajustar directamente del embalaje. Desliza de un lado para otro como un par de gafas de natación.

Las **bandas divididas** te permiten aflojar o apretar el arnés si es necesario.

La **almohadilla nasal anatómica** descansa discretamente debajo de la nariz, es curvada para mayor comodidad y proporciona un excelente sellado para 2 de cada 3 usuarios de CPAP que la probaron en un estudio reciente.^{1†} Es de una silicona suave y de bajo peso que se adapta a la forma de la nariz.

La tecnología **QuietAir™** hace que AirFit N30 sea más silenciosa que las mascarilla nasales de la competencia.* Su ventilación difusa se proyectó para dispersar el aire exhalado para que se extienda ligeramente, minimizando las interrupciones del sueño.

Códigos del producto AirFit N30

| Sistemas completos de mascarillas (incluye armazón, almohadilla nasal y arnés) | Código del producto |
|--|---------------------|
| Sistema AirFit N30 – SML | 64222 |
| Sistema AirFit N30 – MED | 64223 |
| Sistema AirFit N30 – SML-WIDE | 64224 |
| Almohadilla nasal anatómica | |
| Almohadilla anatómica AirFit N30 – SML | 64213 |
| Almohadilla anatómica AirFit N30 – MED | 64214 |
| Almohadilla anatómica AirFit N30 – SML-WIDE | 64215 |

| Sistema de armazón (incluye armazón y almohadilla nasal) | Código del producto |
|--|---------------------|
| Sistema de armazón de AirFit N30 – SML | 64210 |
| Sistema de armazón de AirFit N30 – MED | 64211 |
| Sistema de armazón de AirFit N30 – SML-WIDE | 64212 |
| Arnés | |
| Arnés de AirFit N30 | 64216 |

Equipa a los pacientes para una vida de éxito

¿Sabía que equipar a los pacientes con la mascarilla de CPAP correcta desde el principio puede aumentar la adherencia a terapia?² Un estudio reciente muestra que, en promedio, los usuarios de CPAP duermen mucho más cada día, de hecho, 46 minutos más, con AirFit N30 en comparación con su máscara actual.^{1*} Y cuando se combina con el programa myAir™** de ResMed, los pacientes pueden monitorear su progreso con una puntuación diaria del sueño y adherirse a la terapia con videos y consejos personalizados.

“No puede ser más fácil que esto.”¹

- Participante del estudio de AirFit N30



Armazón

Sistema de armazón
(incluye armazón de la mascarilla y almohadillas nasales)

64210 (SML)
64211 (MED)
64212 (SML-WIDE)

Almohadilla

64213 (SML)
64214 (MED)
64215 (SML-WIDE)


Arnés

64216

Sistema completo de mascarilla (incluye almohadilla nasal, armazón y arnés)

64222 (SML)
64223 (MED)
64224 (SML-WIDE)

AirFit™ N30
Nasal cradle mask

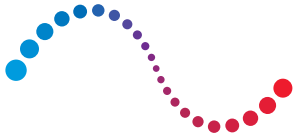

ResMed

AirFit™ N30

Guía de ajuste para AirFit N30



- Mientras sostienes la almohadilla nasal lejos de la nariz, asegúrate de que el tamaño de la almohadilla (SML, MED o SML-WIDE) y los indicadores izquierdo (L) y derecho (R) estén orientados hacia a ti. Coloca la almohadilla nasal debajo de la nariz.



- Jala el arnés de QuickFit™ sobre la cabeza sosteniendo la banda inferior y guiándola alrededor de la parte posterior de la cabeza. La banda superior debe asentarse cómodamente en la coronilla de la cabeza.



- Jala brevemente la almohadilla nasal de la nariz y luego vuelve a colocarla debajo de la nariz para asegurarse de que la almohadilla se ajuste bien.



- Para lograr un ajuste cómodo, separa las bandas divididas en el arnés de QuickFit para aflojar la mascarilla o juntarlas para apretar la mascarilla.



- Para arreglar una fuga, ajuste el arnés de QuickFit tirando de él a través del clip lateral único. Ajustelo lo suficiente para un sellado cómodo. No aprieta demasiado. Puedes ajustar el arnés con el tiempo.



- La mascarilla ahora está ajustada y lista para usar.



Para pacientes con el pelo largo, recomendamos alimentarlo a través de la parte posterior del arnés. Si te atas el pelo en una cola de caballo, debe quedar lo suficientemente alto como para caber cómodamente a través de la correa dividida en el arnés.

Consulta la guía del usuario para obtener más instrucciones e información completa sobre el etiquetado, incluidas indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

* A partir del 21 de octubre de 2019. Según los datos de la guía del usuario disponibles para las mascarillas nasales AirFit N30 y Competencia. El peso total de AirFit N30, que incluye el arnés y excluye el embalaje, es de 45 g. El nivel de potencia acústica de AirFit N30 es de 24,7 dBA.

† Los usuarios de CPAP calificaron los criterios objetivos para AirFit N30 y AirFit P10 en una escala Likert de 0-10

‡ Se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) en las puntuaciones medianas entre las dos mascarillas

** El programa myAir para Air10 de ResMed solo está disponible en español en México, Colombia, Argentina y Chile.

1. 1 Estudio clínico externo orientado por ResMed de 17 usuarios de mascarilla de CPAP existentes y evaluados, del 12 al 25 de febrero de 2019 en Sydney, Australia, que probaron ResMed AirFit N30 en el hogar por 7 noches en lugar de su mascarilla prescrita, ResMed AirFit P10.

2. Brooks, Rita. 8 Tips to Increase CPAP Adherence in Sleep Apnea Patients. AAST. Sept. 5, 2017. Accessed online at: <https://www.aastweb.org/blog/8-tips-to-increase-cpap-adherence-in-sleep-apnea-patients> on Aug. 26, 2019.

Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. (858) 836-5000 o (800) 424-0737 (llamada gratuita). Visita ResMed.com para conocer otras ubicaciones de ResMed en todo el mundo. Air10, AirFit, QuickFit, QuietAir y myAir son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de la familia de empresas ResMed. Competencia registrado en los EUA y otros países. Las especificaciones pueden cambiar sin aviso. Para obtener información sobre patentes y otra propiedad intelectual, visita ResMed.com/ip © 2020 ResMed. 1011777. 2020-11.